


피니싱 & 폴리싱 인스트루먼트

# 프로테크 포인트 EX


프로테크 포인트 EX는 포세레인 작업을 위한 다이아몬드 포인트 컨투어링 도구입니다.  
형태 수정 및 폴리싱에 최적인 형태와 특수 소재로 만들어져 작업 시간을 단축시켜줍니다.

다이아몬드 포인트


**DP-01** W : 1.5mm / H : 8.6mm

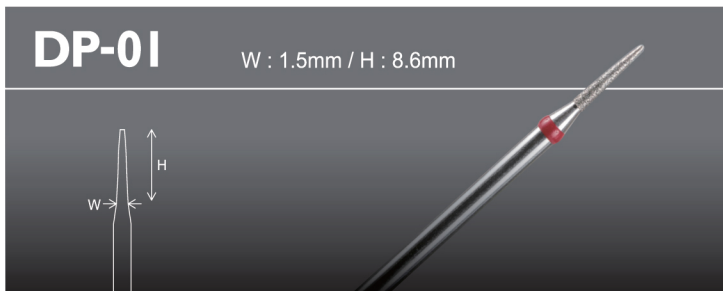

**DP-02** W : 2.2mm / H : 5.0mm

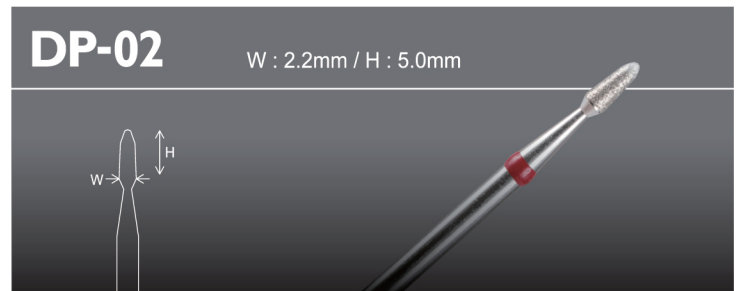


**DP-04** W : 4.0mm / H : 10.1mm

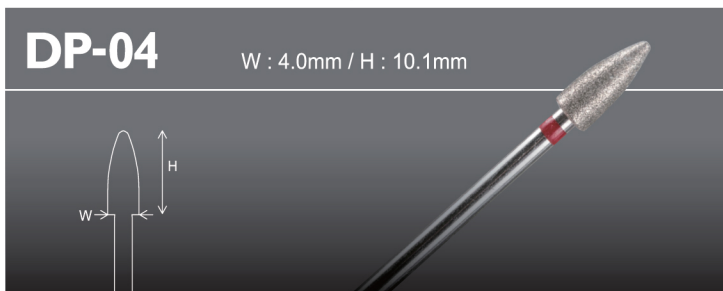


**DP-05** W : 4.5mm / H : 11.2mm



**DP-06** W : 4.9mm / H : 15.0mm

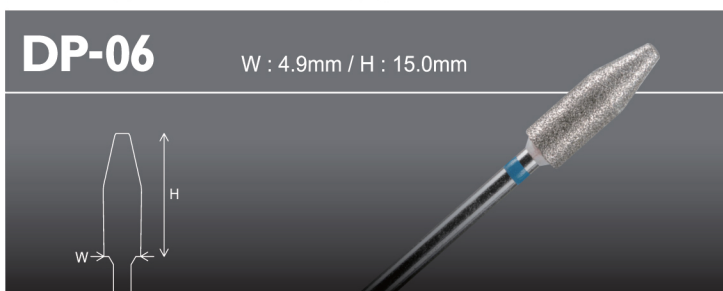


**DP-07** W : 4.0mm / H : 9.4mm

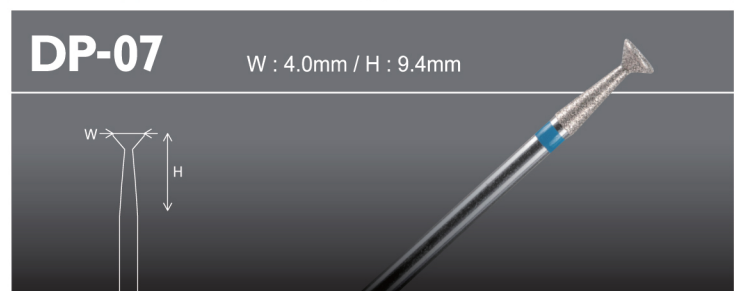


다이아몬드 입자 함유 러버 포인트

**SC-51** W : 12.6mm / H : 2.4mm

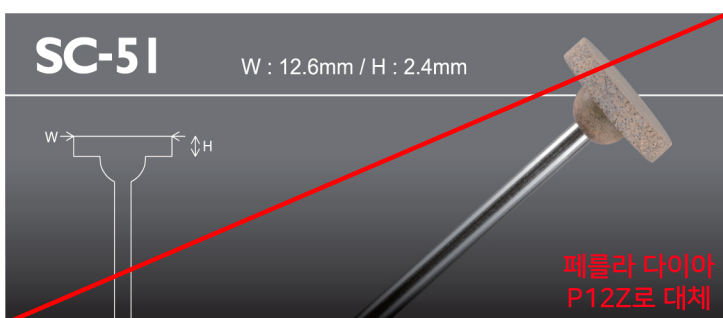

페들라 다이아  
P12Z로 대체

**SD-61** W : 25.8mm / H : 1.9mm

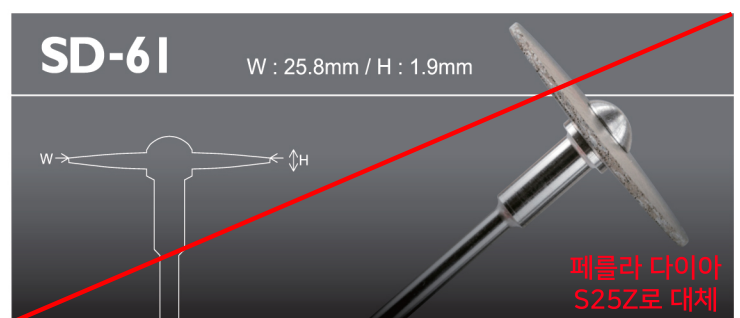

페들라 다이아  
S25Z로 대체

**P12Z**

P12Z-M	회색
P12Z-F	자주
P12Z-S	분홍


**S25Z**

S25Z-M	회색
S25Z-F	자주
S25Z-S	분홍

피니싱 &  
폴리싱 인스트루먼트

# 프로테크 포인트 EX

SD-61

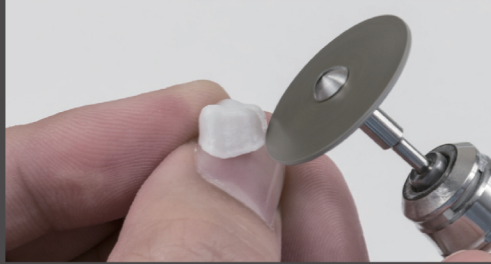

● 지르코니아 및 알루미나 프레임의 그라인딩

DP-01



● 인접면 엠브레저 조정  
● 그루브 라인 형성

DP-02



● 표면 질감 형성  
● 대구치 교합면 형성  
● 파닉 기저부 수정

DP-04




● 표면 질감 형성  
● 대구치 교합면 형성  
● 인접면 엠브레저 조정  
● 파닉 기저부 수정

DP-05



● 표면 질감 형성  
● 대구치 교합면 형성  
● 컨택 조정

DP-06

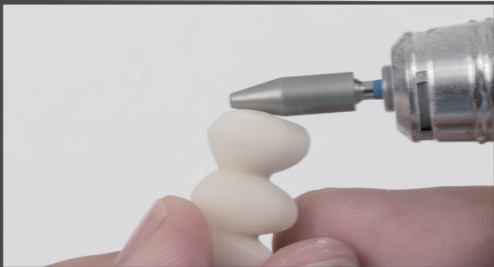

● 외형 수정  
● 표면 질감 형성  
● 컨택 조정

DP-07



● 대구치 교합면 형성  
● 절연 우각부 형성  
● 전치 설측면 부여

SC-51



● 글레이징 소성 전의 연마  
● 파닉 기저부 수정  
● 지르코니아 및 알루미나 프레임의 형태 조정

프로테크 포인트 EX 세트



구성 : DP-01, DP-02, DP-04, DP-05,  
DP-06, DP-07, SD-61, SC-51  
각 1개

회전 속도 (Max.)

DP	15,000 r.p.m.
SC	20,000 r.p.m.
SD	15,000 r.p.m.



파절 및 치핑 방지를 위해  
최대 허용 r.p.m. 이하에서  
작업합니다.

사용시 주의사항

1. 각 도구는 사용할 때마다 소독합니다.
2. 실 사용 전, 모터 속도를 높여 하이 스피드에서도 유격이나 흔들림이 없는지 확인합니다.
3. SD-61 사용 전, 스크루가 단단하게 고정되어 있는지 확인합니다.
4. SD-61을 역회전에서 사용하지 않습니다.
5. 비정상적인 각도 또는 과도한 압력 하에서 사용하지 않습니다.
6. 핸드피스 제조사의 매뉴얼에 따라 샙크를 삽입합니다.
7. 눈 보호를 위한 안경을 착용합니다.

스마트폰으로 신구덴탈 홈페이지를 확인하실 수 있습니다.

